

Desde ahora usted puede contar con la disponibilidad de todo tipo de accesorios y consumibles para sus equipos de EEG y PSG

[www.sleepvirtual.com/products](http://www.sleepvirtual.com/products)

### Sensor de Flujo Respiratorio

El sensor de flujo respiratorio de Neurovirtual es un sensor durable y ajustable que permite mayor comodidad al paciente a la hora de realizar un examen, el sensor produce una señal que es directamente proporcional a los cambios de temperatura del aire que se inhala y se exhala durante la respiración.



### Bandas de Esfuerzo Respiratorio

Las bandas inductivas de Sleepvirtual con tecnología RIP están disponibles en diferentes tallas, desde neonatos hasta XXL en colores azul o blanco, son cómodas para los pacientes y proporcionan señales de alta calidad sin necesidades de ningún ajuste durante la noche.



### Transductor de Presión

El transductor de presión de Sleepvirtual de presión y ronquido, emplea un sensor Piezo para generar un pequeño voltaje en respuesta a los cambios de presión y los cambios acústicos.



### Sensores de Ronquido

“Los sensores Piezo eléctricos de SleepSense convierten las vibraciones del cuello causadas por el ronquido en un pequeño voltaje analógico que proporciona una indicación clara y fiable de la presencia de los ronquidos en el paciente.



### Sensores de Posición Corporal

Los sensores de posición de Sleepvirtual proporcionan un informe preciso de la posición del cuerpo con señales de alta calidad, estos sensores trabajan con la mayoría de equipos de PSG disponibles en el mercado.



### Sensores Pediátricos

Sleepvirtual maneja una amplia variedad de sensores diseñados específicamente para pediatría. Con estos sensores los pacientes pediátricos se sentirán más cómodos, son de fácil aplicación y su señal es de alta calidad.



### Sensores de Oximetría Multiposición

Los sensores de oximetría Nonin combinan el rendimiento de un sensor desechable, con la economía de un sensor reutilizable.



Desde ahora usted puede contar con la disponibilidad de todo tipo de accesorios y consumibles para sus equipos de EEG y PSG  
[www.neurovirtual.com/products](http://www.neurovirtual.com/products)

### Pasta Conductiva

La pasta Ten20 le ofrece el perfecto equilibrio entre adherencia y conductividad lo que permite que los electrodos permanezcan en su lugar sin afectar las señales de transmisión eléctricas.



### Gel Abrasivo

Este gel tiene la función de limpiar la piel de su paciente, ayudando a bajar la impedancia posibilitando así un mejor trazado a sus exámenes. Su formula ligeramente abrasiva mejora la conductividad y ayuda a lograr mayor eficiencia con su equipo.



### Electrodos de Copa de Oro

Electrodos reutilizables, con baño de oro, utilizados para realización de examen de electroencefalograma, con un orificio central lo cual permite llenarlo fácilmente con pasta conductora mejorando así la adhesión en el cuero cabelludo.

Disponibles en cables conductores de 1.21 mts, 1.52 mts, 2.44 mts, 3.00 mts largo.

### Otros Accesorios




Plantillas de EEG



Electrocap



Canulas

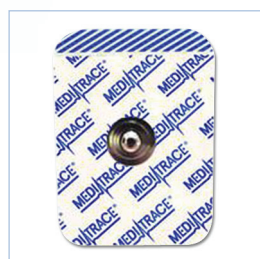

Electrodos Adhesivos



Cables para Electrodo tipo broche



Head Net



Adhesivo



Marcadores